

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F

Nom de naissance : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____

Si mineur : Nom tuteur _____ Prénom tuteur _____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Date du recueil : ____ / ____ / ____ Heure du recueil : _____

Le tube après prélèvement a-t-il été conservé au réfrigérateur : OUI NON

MERCİ DE REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :	OUI	NON
Avez-vous : <input type="checkbox"/> Diarrhées seules <input type="checkbox"/> Diarrhées + Vomissements <input type="checkbox"/> Diarrhées + Fièvre <input type="checkbox"/> Alternance diarrhée – constipation		
Voyage récent à l'étranger ? Si oui : Dans quel pays : _____		
Consommation de fruits de mer, crustacés ou poissons crus récemment ?		
Y-a-t-il les mêmes signes dans votre entourage ?		

Aspect des selles : moulées molles liquides
 glaireuse et sanglantes sanglantes

Examens demandés (ou joindre l'ordonnance) :

Nom du Prescripteur : _____

Date : ____ / ____ / ____

Signature :

Transmettre le(s) tube(s) au laboratoire après avoir rempli cette fiche de renseignements

Il est préconisé de réaliser cette analyse sur **3 selles différentes espacées de 2 à 3 jours chacune** afin d'en améliorer la sensibilité. Un tube doit être préparé pour chacune des 3 selles et apporté au laboratoire le plus rapidement possible.

Délai d'acheminement au laboratoire :

24h à T°C ambiante ou 48h si conservation au réfrigérateur.

Procédure d'utilisation des tubes :



1. Contenu des 3 kits

- 1 tube à bouchon orange et 1 écouvillon (dans le même emballage)
- 1 bande de papier repliée et collée sur elle-même



2. Comment recueillir vos selles

- Déplier et décoller délicatement (sans déchirer) la bande de papier. Coller les parties adhésives sur l'abattant des WC, sur la partie arrière en évitant tout contact avec l'eau des toilettes. S'assurer que le papier soit incurvé (comme le dessin) pour recueillir correctement les selles.
- Effectuer le recueil de selles.
- Ouvrir le sachet contenant le tube et l'écouvillon.
- Insérer l'extrémité renflée de l'écouvillon dans les selles, à plusieurs endroits : une quantité de selles plus importante doit être prélevée pour cette analyse. Mettre l'équivalent d'un **petit pois de selles au bout de l'écouvillon**.
- Dévisser le bouchon orange et introduire l'écouvillon dans le tube sans renverser le liquide.
- Casser la tige de l'écouvillon au niveau de la marque rouge et laisser l'écouvillon dans le tube.
- Revisser correctement le bouchon orange sur le tube de façon à assurer une totale étanchéité.
- Détacher le papier de la cuvette, le déposer au fond des toilettes. Attendre 1 minute pour que le papier se ramollisse et tirer la chasse d'eau (papier biodégradable).

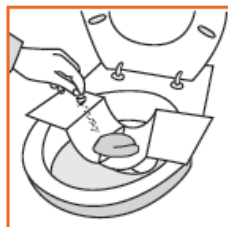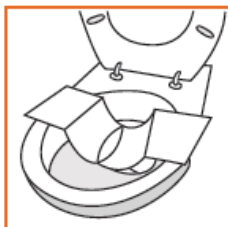

3. Étiquetage du tube

- Inscrire votre **Nom, Prénom** et **Date de naissance** sur le tube avec un stylo bille.
- Replacer le tube dans le sachet.
- Ajouter cette fiche de renseignements complétée dans la poche kangourou du sachet.