

Nom : _____ Prénom : _____ Sexe : M F
Nom de naissance : _____ Date de naissance : ___ / ___ / ___
Si mineur : Nom tuteur _____ Prénom tuteur _____
Adresse : _____
Tél. : _____ E-mail : _____

Date du recueil : ___ / ___ / ___ Heure du recueil : _____
Mode de recueil : classique sonde à demeure sondage aller/retour urinocol (poche)
Température de conservation avant arrivée au laboratoire : 4°C (réfrigérateur) T ambiante

MERCI DE REPENDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :	OUI	NON
Avez-vous au moins un des signes cliniques suivants : brûlures en urinant ? envies fréquentes d'uriner ? fièvre (plus de 38°C) ?		
Une intervention urologique est-elle prévue ?		
S'agit-il d'un suivi de grossesse ? (___ ^{ème} mois)		
Prenez-vous ou allez-vous prendre des antibiotiques ? *		
S'agit-il d'un contrôle après traitement ? *		
* si oui, nom de l'antibiotique : _____		

HEURE DE REMPLISSAGE DES TUBES : ___ H ___

Examens demandés (ou joindre l'ordonnance) :


Nom du Prescripteur : _____
Date : ___ / ___ / ___
Signature : _____

Transmettre le flacon et/ou le(s) tube(s) au laboratoire après avoir rempli la fiche de renseignements

Durée de Conservation des urines : 2h à température ambiante / 12h à 4°C
(tube vert : recommandé dans les 12h à température ambiante, accepté jusqu'à 48h)


Recueillir les urines de préférence le matin au lever (ou 4h après la dernière fois que vous avez uriné si votre état le permet)

- Ne prendre aucun médicament antibiotique avant le recueil (sinon le signaler)
- Pour les femmes : éviter la période des règles (ou alors utiliser un tampon)
- Cette procédure convient aux analyses d'urines sur échantillon les plus fréquentes notamment ECBU, sédiment, protéinurie/albuminurie, microalbuminurie et glycosurie.
- Pour toute autre demande : contacter votre laboratoire.

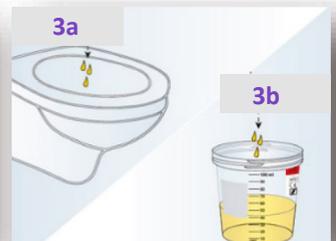

1. Se laver les mains. **Faire une toilette intime soigneuse avec la lingette.**
2. Dévisser le couvercle du pot et le poser sur une surface plane. Ne pas toucher la canule du couvercle.
- 3a. Eliminer le 1er jet d'urines dans les toilettes.** 3b. Recueillir ensuite les urines de façon à remplir le pot à moitié. Replacer le couvercle (bien visser).

Procédure d'utilisation des tubes (tube sec bouchon beige + tube boraté bouchon vert) :

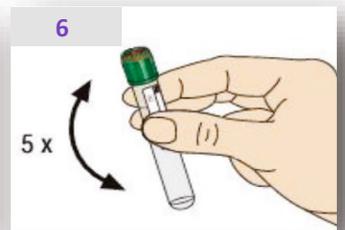

4. Décoller l'étiquette sur le couvercle du pot.
5. Bien homogénéiser le pot JAUNE contenant les urines puis pousser le tube à bouchon beige vers le bas dans l'orifice de transfert puis le tube à bouchon vert. Maintenir le tube jusqu'à remplissage complet.
6. Mélanger le(s) tube(s) par retournement. Indiquer sur le pot et le(s) tube(s) Nom / Prénom / Date de naissance et renseigner l'heure de remplissage des tubes sur la page 1 de ce formulaire.

- Ne jamais ouvrir le tube vert qui contient un milieu de transport pouvant irriter la peau les yeux ou les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment avec de l'eau.
- Si le pot est peu rempli (< 20ml) : ne pas utiliser le tube vert.
- Nous transmettre également le pot d'origine pour d'autres éventuelles analyses.